

VATICO

TRI
POLLAR®

STOP EYE

Hướng dẫn sử dụng

Chào mừng bạn đến với TriPollar® STOP Eye

Bạn đã thực hiện bước đầu tiên để có một làn da đẹp không tì vết.

Hướng dẫn sử dụng này mô tả TriPollar® STOP Eye và cách sử dụng sản phẩm.

Thông tin khác vui lòng xem tại: www.pollogen.com

MỤC LỤC

Bộ thiết bị TriPollar® STOP Eye	7
Giới thiệu về TriPollar® STOP Eye	8
Liệu trình điều trị	10
Xử lý sự cố	12
Thông số kỹ thuật	13

AN TOÀN

Important: Hãy đọc toàn bộ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng sản phẩm. Luôn tuân thủ các cảnh báo và chú ý. Hãy chắc chắn luôn thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn dưới đây khi sử dụng sản phẩm TriPollar® STOP Eye.

Để biết thêm về công nghệ TriPollar, truy cập website của chúng tôi tại: www.polloegen.com

! Cảnh báo và chú ý

TriPollar® STOP Eye là thiết bị điện phải được sử dụng đúng cách. Để giảm thiểu nguy cơ bị thương do điện giật, tuân thủ theo tất cả cảnh báo sau:

- Không chạm vào thiết bị nếu nó bị rơi vào nước. Dùng tay khô rút ngay ổ cắm thiết bị.
- Không đặt hoặc bảo quản thiết bị thiết bị gần bất kì nguồn nước nào, chẳng hạn như bồn rửa hoặc bồn tắm.
- Không ngâm thiết bị ở dưới nước.
- Khi đã được cắm điện, thiết bị phải luôn được giám sát.
- Trước khi sử dụng, hãy đảm bảo rằng hệ thống và nguồn điện không bị hư hỏng. Không được sử dụng nếu dây điện bị hỏng hoặc các thiết bị của máy bị tháo rời.
- Chỉ sử dụng thiết bị cùng với dây điện và nguồn điện được cung cấp.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Đảm bảo bàn tay khô ráo khi sử dụng sản phẩm.
- Tắt máy và rút ổ cắm điện sau khi sử dụng hoặc trước khi vệ sinh và bảo dưỡng.
- Sử dụng Balm TriPollar® trong khi điều trị theo hướng dẫn sử dụng.

Chỉ dẫn an toàn

- Chỉ sử dụng thiết bị cho mục đích đã được dự định, như được mô tả ở hướng dẫn sử dụng.
- Không sử dụng thiết bị trên mí mắt, mắt nhắm, vùng tuyến giáp, môi, tai, vú hoặc bộ phận sinh dục.
- Cảm giác khi sử dụng sản phẩm phải ấm áp và dễ chịu. Nếu cảm thấy khó chịu phải ngừng sử dụng ngay lập tức.
- Việc không tuân theo các hướng dẫn trong sách hướng dẫn này có thể gây tổn thương, thậm chí bỏng da.

Không sử dụng thiết bị nếu có bất kỳ trường hợp nào dưới đây:

- Dưới 18 tuổi.
- Có máy điều hoà nhịp tim hoặc máy khử rung tim bên trong.
- Có cấy ghép kim loại bên trong khu vực điều trị. Điều này không áp dụng trong trường hợp trám răng hoặc cấy ghép răng.
- Đang bị ung thư hoặc có tiền sử bị ung thư, đặc biệt là ung thư da hoặc có nốt ruồi tiền ác tính.
- Có đồng thời các tình trạng nghiêm trọng, chẳng hạn như rối loạn tim.
- Đang mang thai và cho con bú.
- Suy giảm hệ thống miễn dịch do các bệnh ức chế miễn dịch như HIV/AIDS hoặc đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch.
- Mắc các bệnh liên quan đến nhiệt.
- Có các tình trạng da như vết loét, vẩy nến, chàm, phát ban,... ở khu vực điều trị.
- Có tiền sử bị sẹo lồi, hoặc vết thương lành bất thường, hoặc da quá mỏng.

- Đã trải qua các thủ thuật phẫu thuật, tái tạo bề mặt bằng laser tại vùng điều trị trong vòng ba tháng gần đây hoặc vẫn đang trong quá trình điều trị.
- Có chất làm đầy vĩnh viễn trong vòng da điều trị. Nếu có, hãy tham khảo bác sĩ của bạn trước khi sử dụng thiết bị.
- Đã tiêm botox trong khu vực điều trị trong vòng ba tháng qua.
- Có các tổn thương đáng ngờ trong vòng da điều trị.
- Hiện đang sử dụng thuốc, chế phẩm thảo dược, vitamin hoặc thực phẩm bổ sung có thể khiến da mỏng manh và khô ráp.

VATICO

TÁC DỤNG PHỤ

Các tác dụng phụ sau đây là rất hiếm. Tuy nhiên, nếu có xảy ra, chúng thường chỉ xuất hiện tạm thời. Nếu bất kì biểu hiện nào dưới đây xuất hiện và kéo dài hơn 24 tiếng, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ.


- Đau đớn
- Tổn thương da (đóng vảy, phỏng rộp, bong, da mỏng manh, thâm tím).
- Đau đầu nhẹ

Đối với các thủ tục thẩm mỹ hoặc bạn có bất kỳ sự không chắc chắn nào về tác dụng phụ tiềm ẩn, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng thiết bị.

VATICO

BỘ THIẾT BỊ TRIPOLLAR® STOP EYE


Bộ sản phẩm TriPollar® STOP Eye gồm các thiết bị sau:

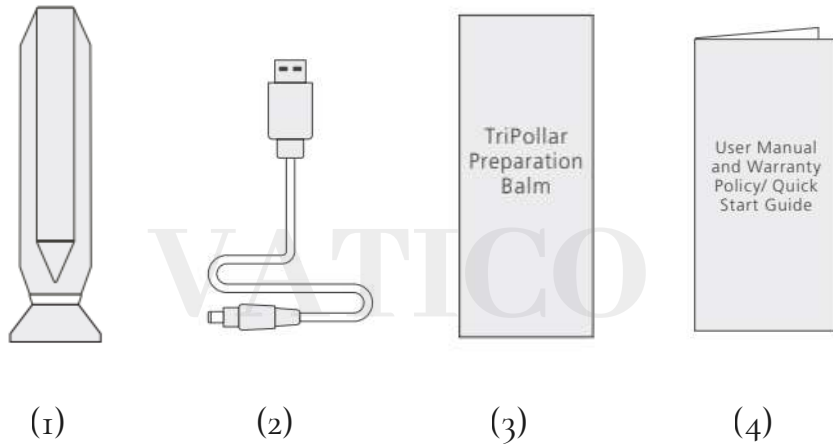

1. Máy TriPollar® STOP Eye
2. Dây điện USB
3. Balm
4. Hướng dẫn sử dụng

GIỚI THIỆU VỀ TRIPOLLAR® STOP EYE

1. Thân máy
2. Đầu điều trị
3. Điện cực
4. Bảng điều khiển
5. Đầu nối USB
6. Nút bật/ tắt và đầu hiển thị ánh sáng
7. Đầu hiển thị ánh sáng xanh lá
8. Đầu hiển thị ánh sáng xanh dương
9. Nắp bảo vệ

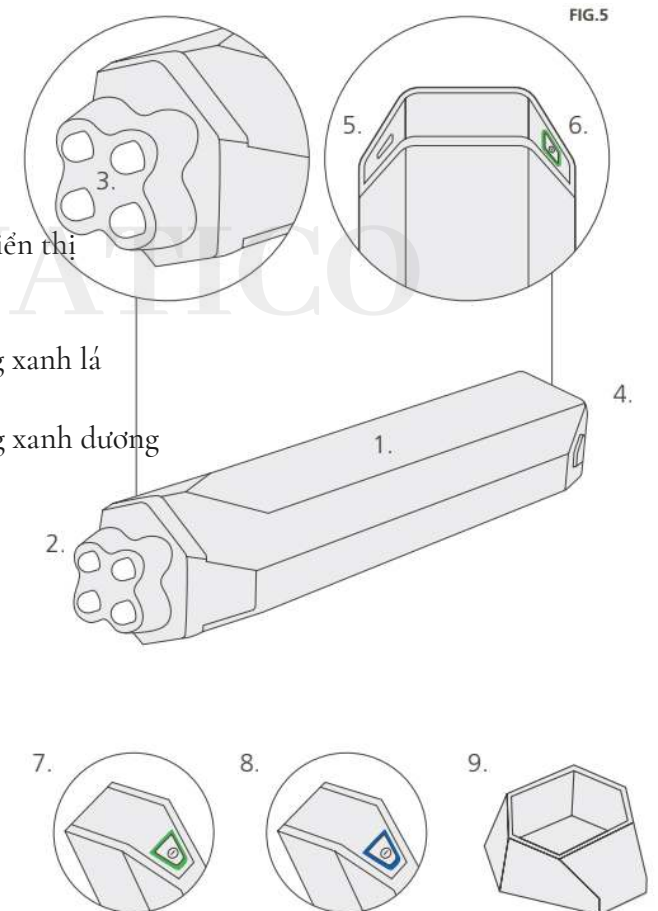

Chỉ số đèn LED của TriPollar® STOP Eye hiển thị như sau:

Đèn LED hiện màu xanh lá:

- Cho biết thiết bị đang BẬT và sẵn sàng sử dụng.
- Nháy chậm - pin yếu, thời gian sử dụng còn lại khoảng 5 phút
- Nháy nhanh - sắp hết pin, còn lại khoảng 2 phút.

Đèn LED hiện màu xanh dương:

- Nhấp nháy - sạc pin.
- Ổn định- pin đã được sạc đầy.

LIỆU TRÌNH ĐIỀU TRỊ

Quá trình điều trị

1. Thời gian điều trị khoảng 4 phút cho mỗi khu vực.
2. Để có kết quả tối ưu, hãy sử dụng thiết bị TriPollar® STOP Eye của bạn 2-3 lần một tuần trong khoảng thời gian từ 6-8 tuần.
3. Đảm bảo rằng bạn có ít nhất một ngày nghỉ giữa các lần điều trị.
4. Để duy trì kết quả lâu dài sau khi bạn đã hoàn thành quá trình điều trị, hãy sử dụng thiết bị TriPollar® STOP Eye 2-4 lần một tháng hoặc khi cần thiết.

Quy trình điều trị

1. Sạc đầy pin cho thiết bị và đèn LED hiện màu xanh dương.
2. Làm sạch và lau khô vùng điều trị.
3. TriPollar® Balm phải được sử dụng xuyên suốt quá trình điều trị. Thoa một lớp kem thật đều lên toàn bộ khu vực da cần điều trị. Trong trường hợp bạn cảm thấy đầu dưỡng bị hấp thụ trong quá trình điều trị, thoa thêm một lớp TriPollar® Balm.
4. Tháo nắp bảo vệ khỏi thiết bị. Bật máy TriPollar® STOP Eye bằng cách nhấn nhanh nút nguồn. Đảm bảo đèn LED màu xanh lá cây xuất hiện.
5. Đặt thiết bị trên da của bạn để đảm bảo rằng cả 4 điện cực chạm vào da. Để có kết quả tốt nhất, tất cả 4 điện cực phải tiếp xúc hoàn toàn với da trong quá trình điều trị.
6. Bắt đầu di chuyển thiết bị theo chuyển động chậm trên khu vực điều trị. Bạn sẽ cảm thấy ấm áp dễ chịu.

QUAN TRỌNG:

hãy đảm bảo giữ thiết bị liên tục di chuyển trên da của bạn. Không để thiết bị dừng tại một nơi vì da có thể bị quá nóng.

7. Điều trị mỗi khu vực trong 4 phút.

Sau khi điều trị

1. Tắt thiết bị bằng cách nhấn nút nguồn trong hai giây.
2. Nhẹ nhàng loại bỏ TriPollar® Balm ra khỏi da.
3. Làm sạch thiết bị TriPollar Stop Eye bằng khăn mềm, khăn ẩm hoặc khăn giấy và đóng nắp bảo vệ. Không nhấn chìm TriPollar® STOP Eye dưới nước!

Chú ý:

Do kết quả tự nhiên của việc điều trị, da có thể xuất hiện một số mẩn đỏ (ban đỏ) và da hơi sưng (phù nề) trong khu vực điều trị. Cả hai biểu hiện trên sẽ biến mất sau một thời gian ngắn.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Nếu thiết bị TriPollar® STOP Eye của bạn không hoạt động, hãy thực hiện các bước sau trước khi liên hệ với trung tâm dịch vụ:

- Đảm bảo rằng bạn đã tháo nắp bảo vệ của thiết bị.
- Đảm bảo rằng dây điện được kết nối chắc chắn với thiết bị và bộ nối nguồn điện được kết nối chắc chắn.
- Nhấn nút Nguồn và kiểm tra xem đèn báo màu xanh lục có sáng không.
- Đảm bảo rằng bạn đã bôi TriPollar® Balm theo hướng dẫn được mô tả trong sách hướng dẫn này. Thiết bị TriPollar® STOP Eye không hoạt động đúng cách khi balm không được bôi lên mặt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng: 60gr

Kích thước vật lý: H=131mm L=26mm W=26mm

Tần số RF TriPollar: 1.0MHz

Điều kiện hoạt động

Nhiệt độ: + 5 ° C đến + 30 ° C

Độ ẩm: 20RH đến 80RH

Đánh giá: DC 5V 2A

Vận chuyển và lưu trữ

Nhiệt độ: 0 ° C đến 40 ° C

Độ ẩm: 10RH đến 90RH

VATICO

TRI
POLLAR®

STOP EYE

*Sản phẩm có thể khác với hình minh họa được trình bày trong hướng dẫn sử dụng này